


ROOT ELEVATORS

FUNCTION OF ROOT ELEVATORS IN SURGERY

To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

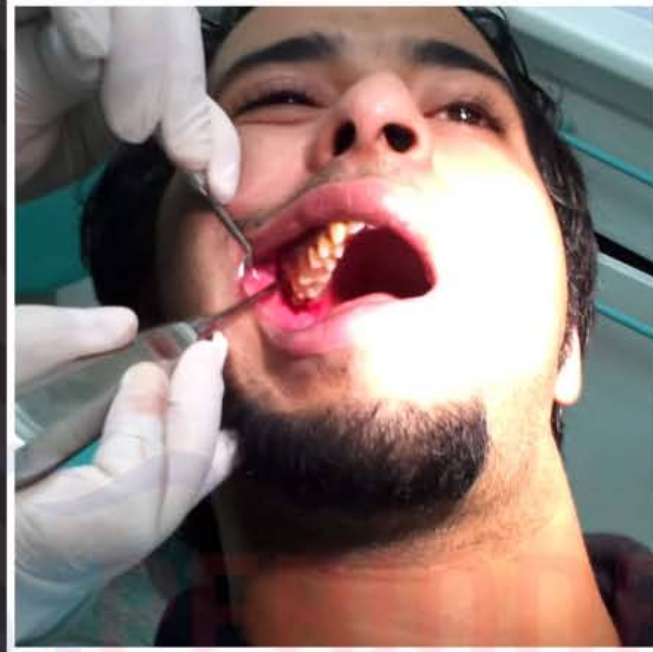

HANDLES FOR ROOT ELEVATORS POINTS A, B, C, D, E, F, G, H, I



FUNCTION OF ROOT ELEVATORS IN SURGERY

To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Dental Root Elevators

To look at one of these instruments you might mistake it for a narrow screwdriver.

That's because just like one an elevator has a handle and then a specially designed "blade" or tip portion.

How they're used.

The tip of an elevator is designed to be wedged into the ligament space between a tooth and its surrounding bone (as shown in our animation).

As the elevator is forced into and twisted around in this space, the tooth is rocked around and pressed against the walls of its socket.

This helps to both expand the shape of the socket and separate the tooth from its ligament.

As this work is continued, the tooth gradually becomes more and more mobile.

In some cases, the dentist may be able to completely remove the tooth just using their elevator.

If not, they will choose a point where they feel they have accomplished as much as they can with it and will then switch to using extraction forceps.



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取強制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنفط (نمط اللغة الإنجليزية)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.



3 mm



Pi2-02
Fig. 1B
Bein

4 mm



Pi2-03
Fig. 2B
Bein

3 mm



Pi2-04
Fig. 3B
Bein

4 mm



Pi2-05
Fig. 4B
Bein

3.2 mm



Pi2-06
Fig. 5B
Bein

3.8 mm



Pi2-07
Fig. 6B
Bein

5.0 mm



Pi2-08
Fig. 4
straight

Pi2-01
1
straight
Bein



Pi2-09
White



Pi2-10
White



Pi2-11
Berten



Pi2-12
Fig. 2
Bein

4.5 mm



Pi2-13
Fig. 3
Bein

4.5 mm



Pi2-14
Fig. 4
Bein



Pi2-15
Fig. 1
Bein



Pi2-16
Fig. 2
Bein

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取强制 (英语模式)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Apexo Root Elevators



FUNCTION: To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.



Luxator Root Elevators



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنفط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取强制 (英语模式)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Bein Root Elevators



Bein
Root Elevator

3.0mm




Pi2-31
Bein
Fig. 1B

4.0mm




Pi2-32
Bein
Fig. 2B

3.0mm




Pi2-33
Bein
Fig. 3B

4.0mm



Pi2-34
Bein
Fig. 4B

3.2mm




Pi2-35
Bein
Fig. 5B

3.8mm



Pi2-36
Bein
Fig. 6B



Seldin Root Elevators



Seldin
Root Elevator

4 mm




Pi2-37
Seldin 34S

5 mm




Pi2-38
Seldin 34

10 mm




Pi2-39
Seldin 4L
(Left)

10 mm




Pi2-40
Seldin 4R
(Right)

13 mm




Pi2-41
Seldin 1L
(Left)

13 mm




Pi2-42
Seldin 1R
(Right)

3.5mm



Pi2-43
Seldin

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取強制 (英語模式)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Flohr Root Elevators



Pi2-44
Fig. 1F
Str.
Flohr Root Elevators

3.0mm

Pi2-45
Fig. 2F
Left
Flohr

3.5mm

Pi2-46
Fig. 3F
Right
Flohr

3.5mm

Pi2-49
Fig. 4 SA
Schmeckebier
Apexo

3.5mm

Pi2-50
Fig. 5 SA
Schmeckebier
Apexo

Flat tip

3.5mm

Pi2-47
Fig. 4B SA
Schmeckebier
Apexo

3.5mm

Concave tip

Pi2-48
Fig. 5B SA
Schmeckebier
Apexo

Coupland Root Elevators



Pi2-51
Coupland No.1
Straight

3 mm


Pi2-52
Coupland No.2

3.5 mm

Pi2-53
Coupland No.3

4 mm

Apical Root Elevators



Pi2-54
Apical 301

2.5 mm

Pi2-55
Apical 302
(Left)

2.5 mm

Pi2-56
Apical 303
(Right)

2.5 mm

Apical Root Elevator

Apical Root Elevators



Pi2-57
Apical 301

3.5 mm

Pi2-58
Apical 302

3.5 mm

Pi2-59
Apical 303

3.5 mm

Pi2-60
Apical 302A

3.5 mm

Pi2-61
Apical 303A

3.5 mm

Pi2-62
Fig. 304

3.5 mm


Apical Root Elevator

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنفط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取强制 (英语模式)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Cryer Root Elevators

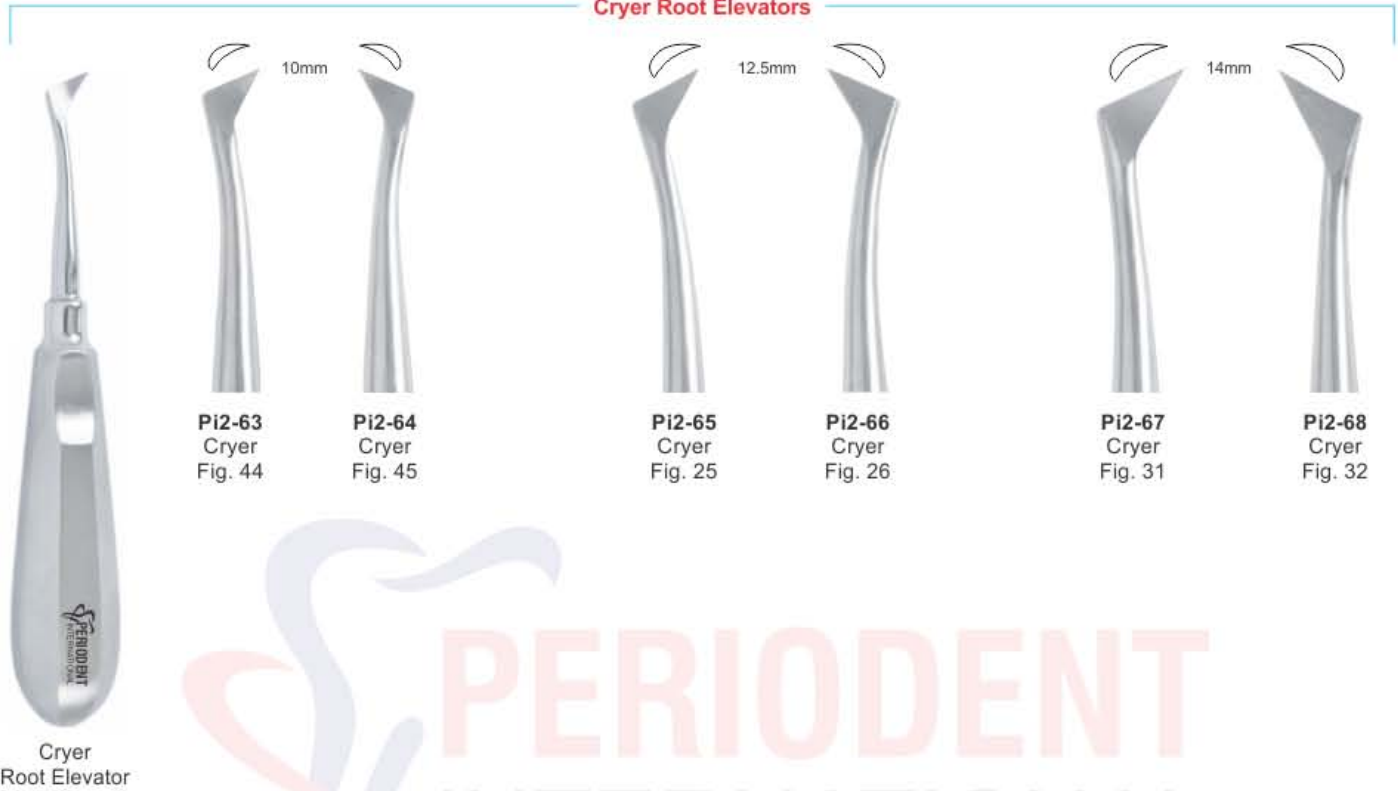

PI2-63
Cryer
Fig. 44

PI2-64
Cryer
Fig. 45

PI2-65
Cryer
Fig. 25

PI2-66
Cryer
Fig. 26

PI2-67
Cryer
Fig. 31

PI2-68
Cryer
Fig. 32

Miller Root Elevators



PI2-69
Miller 1

PI2-70
Miller 2

PI2-71
Miller 3
Left

PI2-72
Miller 3
Right

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取强制 (英语模式)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Lindo Levian Root Elevators



Lindo Levian Root Elevator

Pi2-73 Fig. 25 Lindo-Levien 2.5x5mm straight	Pi2-74 Fig. 35 Lindo-Levien 3x8mm straight	Pi2-75 Fig. 45 Lindo-Levien 4x8mm straight	Pi2-76 Fig. 1 Lindo-Levien 2.5x5 curved	Pi2-77 Fig. 2 Lindo-Levien 3x8 curved	Pi2-78 Fig. 3 Lindo-Levien 4x8 curved	Pi2-79 Lindo-Levien Serrated Left Curved	Pi2-80 Lindo-Levien Serrated Right Curved



Friedmann Roots Elevator

Pi2-81 Fig. 1 Friedman Str.	Pi2-82 Fig. 2 Friedman Left	Pi2-83 Fig. 3 Friedman Right	

Friedmann Roots Elevator

Heidbrink Root Elevators

Pi2-84 Heidbrink No.1	Pi2-85 Heidbrink No.3 (Left)	Pi2-86 Heidbrink No.4 (Right)

Heidbrink Root Elevator

ROOT ELEVATORS


Щипцы экстракционные (английская форма)
 Daviers (Forme Anglaise)
 Zahnzangen (Englische Form)
 提取强制 (英语模式)

Щипці екстракційні (англійська форма)
 Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
 استخراج المنفط (نمط اللغة الإنجليزية)


Function of Root Elevators: To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.



Pi2-87
Fig. 1
Apical 301

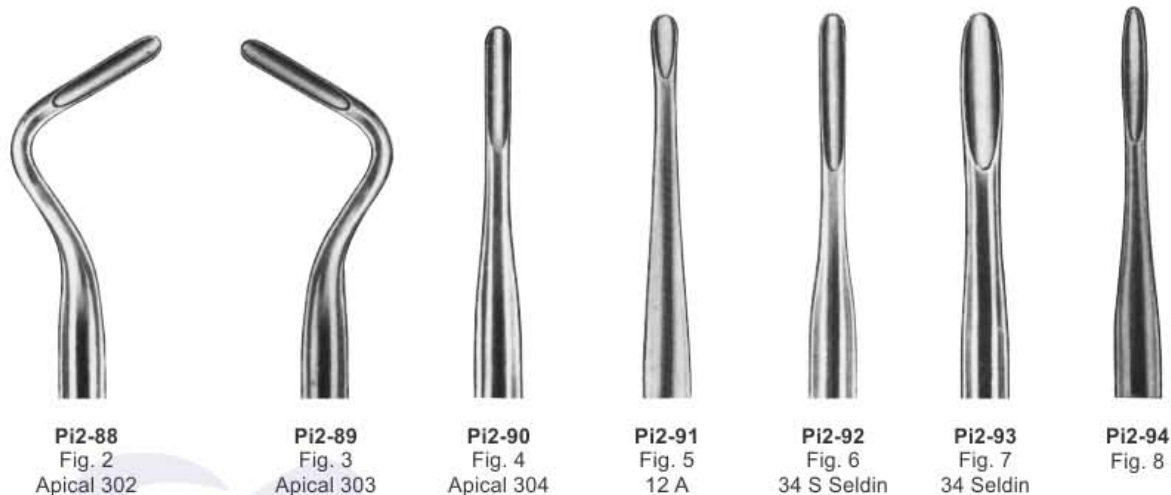

Function of Root Elevators: To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.

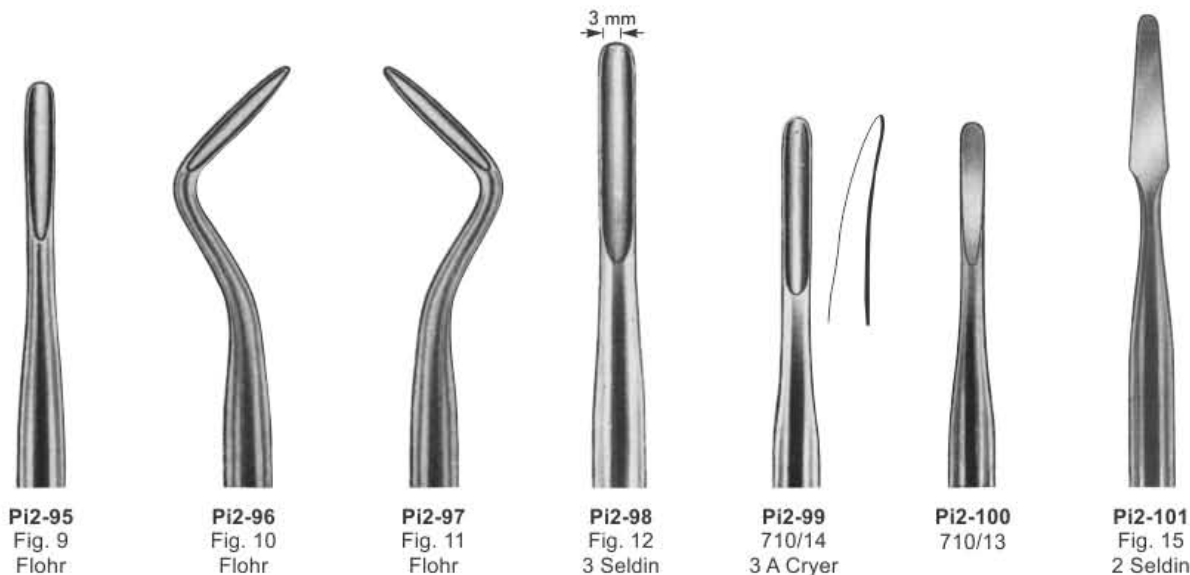

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取强制 (英语模式)

Function of Root Elevators: To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.



Pi2-102
Fig. 190



Pi2-103
Fig. 191



Pi2-104
Fig. 27
27 Cryer



Pi2-105
Fig. 28
28 Cryer



Pi2-106
Fig. 27 S
27 S Cryer



Pi2-107
Fig. 28 S
28 S Cryer



Pi2-108
710/29
(344)



Pi2-109
710/30
(345)



PERIODONT INTERNATIONAL



Pi2-110
Fig. 1
Hylin 4,5mm



Pi2-111
Fig. 2
Hylin 3mm



Pi2-112
Fig. 3
Hylin 3mm



Pi2-113
Fig. 4
Hylin 3mm



Pi2-114
Hylin 153mm



Pi2-115
Read



Pi2-116
Read



Pi2-117
London Hospital



Pi2-118
Coleman



Pi2-119
London Hospital



Hylin lower roots elevator

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Kopp Roots Elevator



Pi2-120
Fig. 1
Kopp 3.6mm
Upper Roots



Pi2-121
Fig. 2
Kopp
3.6mm
Upper Roots



Pi2-122
Fig. 3
Kopp
4.2mm
Upper Roots



Pi2-123
Fig. 4
Kopp
4.2mm
Upper Roots



Pi2-124
Fig. 1
Kopp 3.6mm
Lower Roots



Pi2-125
Fig. 2
Kopp
3.6mm
Lower Roots



Pi2-126
Fig. 3
Kopp
4.2mm
Lower Roots



Pi2-127
Fig. 4
Kopp
4.2mm
Lower Roots



Bein
Pi2-128



Bein
Pi2-129



Bein
Pi2-130



Bein
Pi2-131



Gartner
Pi2-132



Gartner
Pi2-133



Gartner
Pi2-134

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج الملغظ (نمط اللغة الإنجليزية)



Root Pick Elevator With Gold Flexible Points



Pi2-135



Pi2-136



Pi2-137



Pi2-138



Pi2-139



Pi2-140



Pi2-141



Pi2-142



Pi2-143



Pi2-144



Pi2-145

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)



Pi2-146 Luxator 4mm straight	Pi2-147 Luxator 3.5mm straight	Pi2-148 Apexo 3mm Straight	Pi2-149 Apexo 2.5mm Straight	Pi2-150 Apexo 2mm Straight	Pi2-151 Luxator 4mm curved	Pi2-152 Luxator 3.5mm curved	Pi2-153 Luxator 3mm curved	Pi2-154 Luxator 2.5mm curved	Pi2-155 Luxator 2mm curved
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Function of Root Elevators:

To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.



Pi2-157 Curved 3mm	Pi2-158 Straight 5mm	Pi2-159 Curved 5mm	Pi2-160 Straight 2mm	Pi2-161 Curved 2mm	Pi2-162 Straight 4mm	Pi2-163 Curved 4mm
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

LUXATING ELEVATORS



Upper root elevator with helicoidal tip



Upper root elevator with helicoidal tip

Pi2-156
Straight
3mm

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取強制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

Function of Root Elevators:

To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.



Cryer root or fragment elevator

CRYER



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج الملغظ (نمط اللغة الإنجليزية)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

W. Barry Roots Elevator



Winter Roots Elevator



Pott Roots Elevator




ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج الملغظ (نمط اللغة الإنجليزية)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Heidbrink Roots Elevator

Syndesmotomes Roots Elevator

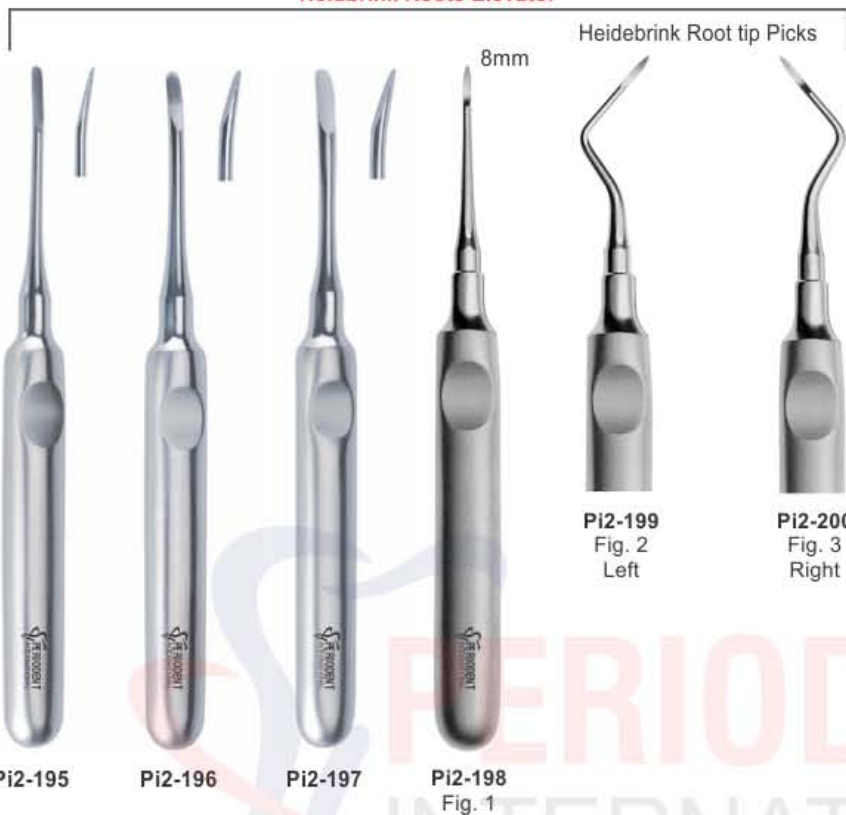

Periotome Roots Elevator

Syndesmotomes



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

BERNARD ROOT ELEVATORS



Pi2-212
7 Bernard
Right #504

Pi2-213
11 Bernard
Straight #504

Pi2-214
6 Bernard
Left #504

DESMOTOME ROOT ELEVATORS



Pi2-215
Desmotome
straight

Pi2-216
Desmotome
Distal

Pi2-217
Desmotome
Mesial

WARWICK JAMES ROOT ELEVATORS



Pi2-218
192/1

Pi2-219
192/2

Pi2-220
192/3

Coupland Elevators

Coupland root elevators set
3mm, 3.5mm & 4mm tip width
Sand Blasted no slip handle
Surgical Stainless Steel
Sterilized in all Commercial
Sterilizers

1C Elevator Coupland 3mm



Pi2-221

Pi2-222

Pi2-223



Coupland

Pi2-224
Fig. 1
190/15

Pi2-225
Fig. 2
190/16

Pi2-226
Fig. 3
190/17



universal mini-elevator for fragments



syndesmotome

Pi2-227
Fig. 1
Syndesmotome

HEIDBRINK ROOT TIP

Available in Hollow Handle 8mm, Ø9.5mm



Pi2-231
Heidbrink

Pi2-232
Heidbrink


Pi2-233
Heidbrink

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

LUXACUT

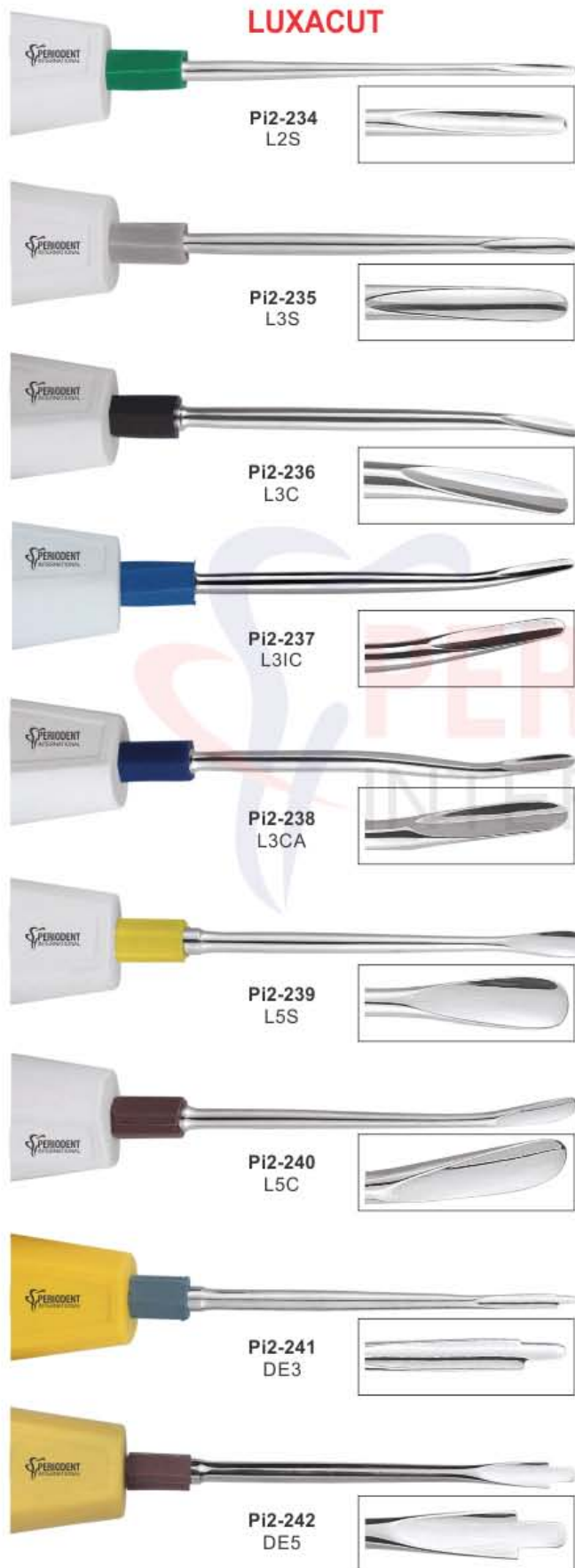

Luxacut Luxation Instrument

Over recent years, there has been an increased demand for reduced trauma during extraction procedures. The use of elevators has become widespread for the loosening of teeth before the application of forceps. Luxation instruments tips are more finely tapered than elevators tips. Their characteristics are a combination of a Perioste and an elevator. The sharp tip enables more efficient cutting of the periodontal ligament, whilst the tapering shaft assists with controlled expansion of the bony socket. The extraction operation may be performed with the minimum amount of tissue damage. Healing is therefore quicker and the operation is less distressing for the patient and surgical team alike.


The Luxacut Kit comprises of seven Luxation instruments, a straight, curved, inverted curved & contra blade version in Three different widths. Also available in dual edge blades

- PI2-234-L2S Straight Blade- Green-2 mm- Apical and/or Interproximal
- PI2-236-L3C Curved Blade- Black- 3 mm General use/Starter
- PI2-235-L3S Straight Blade- Grey- 3 mm Interproximal
- PI2-238-L3CA Contra Angle- Blue- 3 mm Lingual and/or distal-Molars
- PI2-237-L3IC Inverted Curved- Light Blue- 3 mm- General, Lingual and/or Distal
- PI2-240-L5C Curved Blade- Brown- 5 mm- Large molar roots- General use
- PI2-239-L5S Straight Blade- Yellow- 5 mm- Interproximal
- PI2-241-DE3 dual edge/straight grey 3 mm/1.5 mm
- PI2-242-DE5 dual edge/straight brown 5 mm Deep fractured/Decayed Roots

Luxacut Kit



PI2-243
LWC7

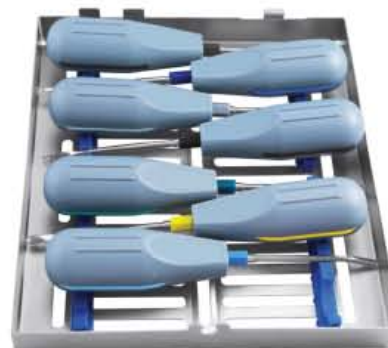

PI2-244
LGWC7

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

Luxating Elevators Set of 11 Pcs Pi2-245

This section includes the Luxating Elevator set with Stainless Steel Handle.
Long & light weight handle design provide excellent smooth grip with controlled force transfer.
The working procedure is similar as mentioned in the previous section.



Pi2-246
Luxating Elevators
1.5mm, Straight



Pi2-247
Luxating Elevators
2mm, Straight



Pi2-248
Luxating Elevators
2mm, Curved



Pi2-249
Luxating Elevators
3mm, Straight



Pi2-250
Luxating Elevators
3mm, Curved



Pi2-251
Luxating Elevators
3mm, Double Curved



Pi2-252
Luxating Elevators
3mm, Curved Up



Pi2-253
Luxating Elevators
4mm, Straight



Pi2-254
Luxating Elevators
4mm, Curved



Pi2-255
Luxating Elevators
5mm, Straight



Pi2-256
Luxating Elevators
5mm, Curved



3 mm
Pi2-257
Fig. 1
Coupland

3.5 mm
Pi2-258
Fig. 2
Coupland

4 mm
Pi2-259
Fig. 3
Coupland

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取強制 (英語模式)

FUNCTION: To Loosen Tooth or Root From Bony Socket Prior to Placement of The Extraction Forceps.

Pi2-260 LUXATOR SET OF 4 PCS STRAIGHT



Pi2-265 LUXATOR SET OF 4 PCS CURVED



APICAL ROOT ELEVATORS



Pi2-270
Fig. 1, 3mm
Frideman
Straight



Pi2-271
Fig. 2
Frideman
Left



Pi2-272
Fig. 3
Frideman
Right



Pi2-273
Fig. 304



Pi2-274
Apical 302A



Pi2-275
Apical 303A

Pi2-286 Root Elevators Set of 10 Pcs



Pi2-276
Root Elevator
DL 32
for upper roots
round point.



Pi2-277
Root Elevator
DL 33
for upper roots
round point.



Pi2-278
Bein
DL 34
for upper roots
round point.



Pi2-279
Flohr
Fig. 3
for lower roots



Pi2-280
Flohr
Fig. 4
for lower roots



Pi2-281
Cryer-White
for lower roots,
wide pattern



Pi2-282
Cryer-White
for lower roots,
wide pattern



Pi2-283
Apical 301



Pi2-284
Apical 302



Pi2-285
Apical 303

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取強制 (英語模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

Pi2-287 Wisdom Roots Elevator



Pi2-288
Wisdom
for 18 and 38

Pi2-289
Wisdom
for 28 and 48

Pi2-290 Potts Elevators set of 2 Pcs

These root elevators are used for releasing the ligaments around the neck of the tooth, and to facilitate the extraction. The working end are smooth These are used for impacted upper 3rd Molars without bony obstruction.

Elevator according to Potts
Working Tips are smooth
Smooth Surface Handle
Surgical Stainless Steel
Sterilized in all Commercial Sterilizers



6 Potts Elevator

7 Potts Elevator

Pi2-291

Pi2-292

Pi2-293 Schmeckebier Apexo Elevators Set of 2 Pcs

Schmeckebier Apexo elevators use to loosen the tooth from the periodontal ligament and ease extraction Sand Blasted no slip handle Surgical Stainless Steel Sterilized in all Commercial Sterilizers



Schmeckebier Apexo Elevator L

Schmeckebier Apexo Elevator R

Pi2-294

Pi2-295

Pi2-298 Apical Elevators Set of 2 Pcs

Apical root elevators, right, left For upper and lower root tips Width of tip 3 mm Smooth Surface Handle Surgical Stainless Steel Sterilized in all Commercial Sterilizers



Apical elevator Left, 3mm

Apical elevator Right, 3mm

Pi2-296

Pi2-297

Pi2-299 Seldin Elevators Set of 3 Pcs

Seldin root elevators Smooth Surface Handle Surgical Stainless Steel Sterilized in all Commercial Sterilizers



34 Str. Seldin Elevator, Upper and lower anterior roots

34S Seldin Elevator, Upper & lower anterior roots, sharp cone edge

2S Seldin Elevator, Lower 3rd Molars

Pi2-300

Pi2-301

Pi2-302

Pi2-303 B-Cogswell & Apexo Elevators Set of 2 Pcs

Smooth Surface Handle Surgical Stainless Steel Sterilized in all Commercial Sterilizers



301 Apexo Elevator, for displacement of deeply seated roots

B Cogswell Elevator

Pi2-304

Pi2-305

Pi2-308 Medium Cryer Root Elevators set of 4 Pcs

Left & Right, with medium working points Working Tips are smooth Smooth Surface Handle Surgical Stainless Steel Sterilized in all Commercial Sterilizers



21Mini Cryer Elevator, Right

22Mini Cryer Elevator, Left

Pi2-306

Pi2-307



44 Cryer Root Elevator, Right

44 Cryer Root Elevator, Left

Pi2-309

Pi2-310

Pi2-311 Large Cryer Root Elevators set of 2 pcs

Left & Right, with large working points Working Tips are smooth Smooth Surface Handle Surgical Stainless Steel Sterilized in all Commercial Sterilizers



30 Cryer Root Elevator, Right

31 Cryer Root Elevator, Left

Pi2-312

Pi2-313

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取強制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

Pi2-314 Posterior Flared Tip Elevators set of 4 Pcs

This section includes a comprehensive set of Posterior Flared Tip Elevators. These elevators used to loosen the tooth from the periodontal ligament and ease extraction, particularly used for Upper Posterior Roots and Upper 3rd Molar.

E46 & E46R: Mesial & Distal with 2.75mm, Smooth working tips
E77 & E77R: Mesial & Distal with 3.75mm, Serrated working tips

Surgical Stainless Steel Hollow handle,
very light weight Completely Sterilizable



Pi2-315 46R Elavator, Smooth, Mesial, 2.75mm
Pi2-316 46 Elavator, Smooth, Distal, 2.75mm
Pi2-317 77R Elavator, Serrated, Mesial, 3.75mm
Pi2-318 77 Elavator, Serrated, Distal, 3.75mm

Pi2-319 Lindo-Levien Elevators Set of 4 Pcs

These root elevators are used for releasing the ligaments around the neck of the tooth, and to facilitate the extraction. The working end serration can be very helpful during the initial phase of extraction.


Elevator according to Lindo-Levien
Working part straight with serration
Width 2.2mm 3.0mm or 4.0mm
Smooth Surface Handle
Surgical Stainless Steel
Sterilized in all Commercial Sterilizers



Pi2-320 Lindo-Levien Elevators 3mm, Straight
Pi2-321 Lindo-Levien Elevators 3mm, Curved
Pi2-322 Lindo-Levien Elevators 4mm, Straight
Pi2-323 Lindo-Levien Elevators 4mm, Curved

LENDO-LEVIAN ELEVATORS STR.


Set of 3 Pcs Pi2-324

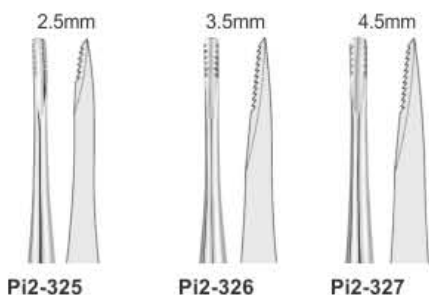

Pi2-325 **Pi2-326** **Pi2-327**

LENDO-LEVIAN ELEVATORS CVD.

Set of 3 Pcs Pi2-328

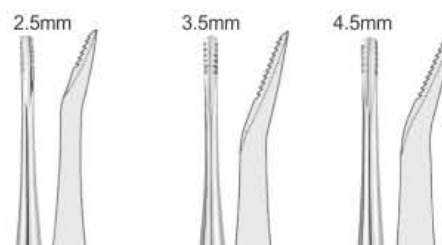

Pi2-329 Fig. 1 **Pi2-330** Fig. 2 **Pi2-331** Fig. 3



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取強制 (英語模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنفط (نمط اللغة الإنجليزية)

Laxutor Root Elevators Set of 10 Pcs Pi2-332



Long Type
Laxutor
Root Elevator



Pi2-333
Laxutor
1.5mm
Str.



Pi2-334
Laxutor
2mm
Str.



Pi2-335
Laxutor
3mm
Str.



Pi2-336
Laxutor
5mm
Str.



Pi2-337
Laxutor
3mm
Cvd.

FUNCTION:

To loosen tooth or root from bony socket prior to placement of the extraction forceps.



Pi2-338
Laxutor
5mm
Cvd.



Pi2-339
Laxutor
3mm
Upper
Angle



Pi2-340
Laxutor
3mm
Double
Angle



Pi2-341
Laxutor
3mm
Str.



Pi2-342
Laxutor
5mm
Str.

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

PI2-343 LUXATORS SET OF 7 PCS



PI2-351 LUXATORS SET OF 10 PCS



BEIN ROOT ELEVATORS SET OF 6 PCS



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- Zahnzangen (Englische Form)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)
- 提取強制 (英語模式)

BEIN ROOT ELEVATORS SET OF 6 PCS



APICAL ROOT ELEVATORS SET OF 7 PCS



FLOHR ROOT ELEVATORS SET OF 6 PCS



ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

2mm 3mm 4mm

Pi2-391 Bein DL 32 for upper roots round point.

Pi2-392 Bein DL 33 for upper roots round point.

Pi2-393 Bein DL 34 for upper roots round point.

Pi2-394 Cryer 27 (Left)

Pi2-395 Cryer 28 (Right)

Pi2-396 Flohr 3mm

Pi2-397 Flohr 3mm

Pi2-398 Root Elevator Set of 7 Pcs

ROOT ELEVATORS SET OF 7 PCS

2mm 3mm 4mm

Pi2-399 Bein DL 32 for upper roots round point.

Pi2-400 Bein DL 33 for upper roots round point.

Pi2-401 Bein DL 34 for upper roots round point.

Pi2-402 Flohr Fig. 3 for lower roots

Pi2-403 Flohr Fig. 4 for lower roots

Pi2-404 Cryer-White for lower roots, wide pattern

Pi2-405 Cryer-White for lower roots, wide pattern

Pi2-406 Root Elevator Set of 7 Pcs

4mm 3mm 2mm

Left Right Set of 2 Cryer Elevators

Pi2-407 **Pi2-408** **Pi2-409** **Pi2-410** **Pi2-411** Set of 3 Coupled Elevators

Pi2-412 Root Elevators Set of 5 Pcs

Pi2-413 **Pi2-414** **Pi2-415** **Pi2-416**

Pi2-417 Root Elevators Set of 4 Pcs

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

PI2-418

Bernard Elevators -Syndesmotomes

Set of 5 Pcs

Bernard Root Elevators are particularly suitable for the excision of fractured roots or root fragments.

They represent a combination of root tip elevators and luxating elevators.

The inner side is concave and the laterals edges are for cutting. This allow for rotatory movements, and when applying slight pressure, the ligaments can be separated and the remaining root fragments can be loosened.

This section includes a set of five Bernard Root Elevators, including Left, Right, Straight, Mesial & Distal form.

All elevators are made from Surgical Stainless Steel Hollow handle, light weight Completely Sterilizable Bernard Root elevators also know as Syndesmotomes.

They can also be use as Periostome or to elevate Small Roots



PI2-419
Distal Spade Root Tip Elevator



PI2-420
Mesial Spade Root Tip Elevator



PI2-421
Straight Spade Root Tip Elevator



PI2-422
Right Spade Root Tip Elevator



PI2-423
Left Spade Root Tip Elevator

BAYONET ELEVATORS SET OF 7 PCS



PI2-425



PI2-426



PI2-427



PI2-428



PI2-429



PI2-430



PI2-431

PI2-432

PDL Elevators Set of 7 Pcs



PI2-433

PDL Elevators Set of 7 Pcs Color Coated



ROOT ELEVATORS

Щипцы экстракционные (английская форма)
 Daviers (Forme Anglaise)
 Zahnzangen (Englische Form)
 提取强制 (英语模式)

Щипці екстракційні (англійська форма)
 Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
 استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)



Area: distal



Area: mesial



Pi2-434 PDL Elevators Set of 10 Pcs



			Pi2-435 Luxa-Tool, straight, 3.0 mm,
			Pi2-436 Luxa-Tool, curved, 3.0 mm,
			Pi2-437 Proximator, curved, 2.5 mm, distal elevator,
			Pi2-438 Proximator, curved, 2.5 mm, mesial elevator,
			Pi2-439 Proximator, curved, 4.5 mm, distal elevator,
			Pi2-440 Proximator, curved, 4.5 mm, mesial elevator,
			Pi2-441 Syndesmotome, curved, 4.0 mm, for distal access
			Pi2-442 Syndesmotome, curved, 4.0 mm, for mesial access
			Pi2-443 Syndesmotome, curved left, 4.0 mm, for lingual/buccal luxation,
			Pi2-444 Syndesmotome, curved right, 4.0 mm, for lingual/buccal luxation,

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

微创牙挺



型号	名称
PI2-445	微创葫芦牙挺 1#
PI2-446	微创葫芦牙挺 2#
PI2-447	微创葫芦牙挺 3#
PI2-448	微创葫芦牙挺 4#
PI2-449	微创葫芦牙挺 5#
PI2-450	微创葫芦牙挺 6#
PI2-451	微创葫芦牙挺 7#
PI2-452	葫芦式手柄微创牙挺套装

型号	名称
PI2-453	金属灰柄微创牙挺 1# 直刃头 刃宽2.0mm
PI2-454	金属灰柄微创牙挺 2# 弯刃头 刃宽3.0mm
PI2-455	金属灰柄微创牙挺 3# 直刃头 刃宽3.0mm
PI2-456	金属灰柄微创牙挺 4# 反向弯曲 刃宽3.0mm
PI2-457	金属灰柄微创牙挺 5# 反角弯曲 刃宽3.0mm
PI2-458	金属灰柄微创牙挺 6# 弯刃头 刃宽5.0mm
PI2-459	金属灰柄微创牙挺 7# 直刃头 刃宽5.0mm
PI2-460	金属灰柄微创牙挺 8# 深层切割 增隙 (大)
PI2-461	金属灰柄微创牙挺 9# 深层切割 增隙 (小)



型号	名称
PI2-462	微创牙挺 十支装 (带弹性)

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forcèps de Extracció (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

普通牙挺



Pi2-463	普通牙挺 10# 弯圆刃 cdr 5.0mm
Pi2-464	普通牙挺 11# 弯圆刃 cdr 2.0mm
Pi2-465	普通牙挺 12# 弯圆刃 cdr 2.5mm
Pi2-466	普通牙挺 13# 弯圆刃 cdr 3.5mm
Pi2-467	普通牙挺 左弯
Pi2-468	普通牙挺 右弯

型号	名称
Pi2-469	普通牙挺 1# 直圆刃 str 2.0mm
Pi2-470	普通牙挺 2# 直圆刃 str 2.5mm
Pi2-471	普通牙挺 3# 直圆刃 str 3.0mm
Pi2-472	普通牙挺 4# 直圆刃 str 3.5mm
Pi2-473	普通牙挺 5# 直圆刃 str 4.0mm
Pi2-474	普通牙挺 6# 直圆刃 str 4.5mm
Pi2-475	普通牙挺 7# 直圆刃 str 5.0mm
Pi2-476	普通牙挺 8# 弯圆刃 cdr 3.0mm
Pi2-477	普通牙挺 9# 弯圆刃 cdr 4.0mm



型号	名称
Pi2-478	根尖挺 (右弯)
Pi2-479	根尖挺 (左弯)
Pi2-480	根尖挺 (直)

型号	名称
Pi2-481	丁字挺 左
Pi2-482	丁字挺 右

微创牙挺



型号	名称
Pi2-483	微创手握牙挺 1#
Pi2-484	微创手握牙挺 2#
Pi2-485	微创手握牙挺 3#
Pi2-486	微创手握牙挺 4#
Pi2-487	微创手握牙挺 5#
Pi2-488	微创手握牙挺 6#
Pi2-489	微创手握牙挺 7#
Pi2-490	手握式手柄微创牙挺套装

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)



Pi2-491

Luxators (White Handle) Set of 10 Pcs


- | | |
|-------------------|-----------------|
| 01 1.5mm Straight | 06 1.5mm Curved |
| 02 2mm Straight | 07 2mm Curved |
| 03 3mm Straight | 08 3mm Curved |
| 04 4mm Straight | 09 4mm Curved |
| 05 5mm Straight | 10 5mm Curved |



Pi2-492

Luxators Set of 8 Pcs

- 01 Luxator
- 02 Luxator
- 03 Luxator
- 04 Luxator
- 05 Luxator
- 06 Luxator
- 07 Luxator
- 08 Luxator

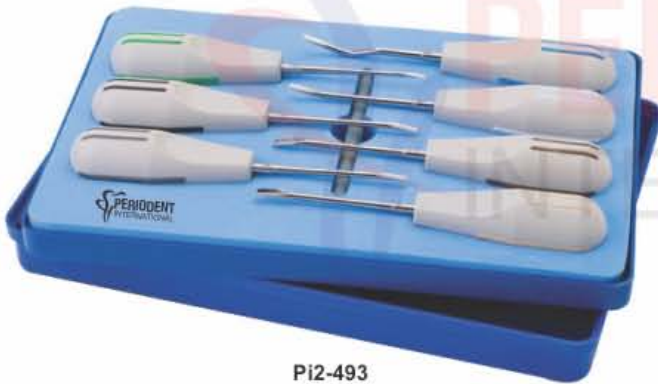

Pi2-493

Luxators Set of 7 Pcs

- 01 Luxator
- 02 Luxator
- 03 Luxator
- 04 Luxator
- 05 Luxator
- 06 Luxator
- 07 Luxator



Pi2-494

Luxators Set of 8 Pcs

- 01 Luxator
- 02 Luxator
- 03 Luxator
- 04 Luxator
- 05 Luxator
- 06 Luxator
- 07 Luxator
- 08 Luxator



Pi2-495

Luxators Set of 8 Pcs

- 01 Luxator
- 02 Luxator
- 03 Luxator
- 04 Luxator
- 05 Luxator
- 06 Luxator
- 07 Luxator
- 08 Luxator

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取强制 (英语模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)



Pi2-496
Root Elevators Set of 6 Pcs


- 01 Bein 3mm
- 02 Bein 5mm
- 03 Cryer 31
- 04 Cryer 32
- 05 Apical 302
- 06 Apical 303



Pi2-497
Root Elevators Set of 6 Pcs

- 01 Bein 3mm
- 02 Bein 5mm
- 03 Cryer 31
- 04 Cryer 32
- 05 Flohr Fig. 2
- 06 Flohr Fig. 3

Pi2-498
Elevators Set of 7 Pcs

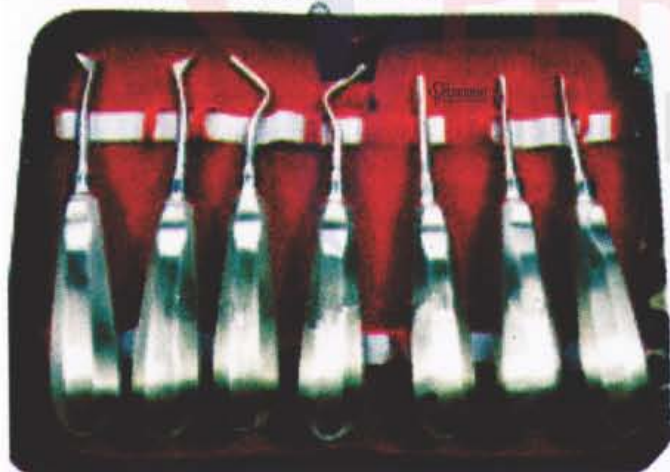

- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator

Pi2-499
Elevators Set of 8 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator

Pi2-500
Root Elevators Set of 10 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator
- 09 Elevator
- 10 Elevator

ROOT ELEVATORS

- Щипцы экстракционные (английская форма)
- Daviers (Forme Anglaise)
- Zahnzangen (Englische Form)
- 提取強制 (英語模式)

- Щипці екстракційні (англійська форма)
- Forceps de Extracción (Forme Inglesa)
- استخراج المنقط (نمط اللغة الإنجليزية)

PI2-501
Elevators Set of 10 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator
- 09 Elevator
- 10 Elevator

PI2-502
Elevators Set of 13 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator
- 09 Elevator
- 10 Elevator
- 11 Elevator
- 12 Elevator
- 13 Elevator

PI2-503
Elevators Set of 8 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator

PI2-504
Elevators Set of 8 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator

PI2-505
Elevator Set of 8 Pcs



- 01 Elevator
- 02 Elevator
- 03 Elevator
- 04 Elevator
- 05 Elevator
- 06 Elevator
- 07 Elevator
- 08 Elevator